



Oxivir Excel Wipe

Széles hatásspektrummal rendelkező tisztító- és fertőtlenítő kendő vízálló kemény felületekre és nem invazív orvostechnikai eszközökhöz

Termékleírás

Az AHP technológiával rendelkező Diversey Oxivir Excel tisztító- és fertőtlenítőszer egy hatékonyabb alternatívát kínál a hagyományos fertőtlenítőszerekkel szemben, mivel teljes virucid hatékonyságot nyújt mindössze 30 másodperc alatt, ugyanakkor nagyon kíméletes a felületekkel szemben, és nem jelent veszélyt a felhasználókra. Aktív hatóanyaga a hidrogén-peroxid, a használat után néhány perccel vízre és oxigénre bomlik, ami sokkal biztonságosabb mind a környezet, mind az emberek számára.

Legfontosabb tulajdonságok


- Teljes virucid hatás 30 másodperc alatt
- Baktericid, fungicid és virucid hatásspektrummal rendelkezik
- Kiváló tisztítóhatás nagy teljesítményű felületaktív rendszerrel
- Illatanyag-mentes
- Nincs szükség öblítésre
- Az aktív hatóanyagok vízre és oxigénre bomlanak, ami sokkal biztonságosabb a környezetre és a felhasználók számára egyaránt.

Előnyök

- Mikrobiológiai tesztek (EN tesztek) tanúsága szerint a kórokozók széles köre ellen hatékony, teljes virucid hatással rendelkezik, többek között a Poliovírus, Adenovírus és Murine norovírus-t is elpusztítja, hatékony minden burokkal rendelkező vírus ellen (HIV, HBV, HCV, Influenza, Vaccinia vírus és Coronavirus). Széles hatásspektrumának köszönhetően magas higiéniai színvonal biztosítására alkalmas.
- Nem jelent veszélyt a felhasználókra, egyéni védőeszköz (PPE) használata nem szükséges. Nincs veszélyességi besorolása.
- Kiváló tisztítási teljesítményt nyújt, tízszer gyorsabb az általános fertőtlenítésszereknél
- Az AHP formula óvja a felületeket, ezáltal meghosszabbítja azok élettartamát. Nem hagy szennyezőanyagot maga után.
- Alkalmazható magas kockázatú területeken, mint a kereskedelem, az oktatás, az egészségügy és más ágazatokban.
- Akár 35%-kal is növelheti a fertőtlenítés hatékonyságát.

Használati útmutató

1. Távolítsa el a makacs szennyeződések.
2. Nyissa ki a kendő csomagolását, vegyen ki egy darabot, majd zárja vissza a fedőt.
3. Törölje át a felületeket, győződjön meg róla, hogy az egész felület megtisztította, majd hagyja megszáradni.
4. Bizonyosodjon meg róla, hogy a felület a behatási idő alatt végig nedves marad.
5. Cserélje le a kendőt, ha nem nedvesíti be a felületet, ha láthatóan szennyezett, vagy ha másik területet szeretne megtisztítani.

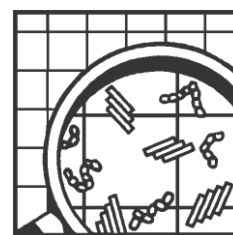

© A.I.S.E.



Oxivir Excel Wipe

Technikai adatok

Megjelenés: polipropilén kendő

Illat: semleges

pH érték (használatban): 1.95

Relatív sűrűség (20°C): 1.000

Minőségét megőrzi: 720 napig

A fenti adatok átlagos gyártási értékek, és nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelési- és tárolási információ

A termék kezelésére és hulladékba kerülésére vonatkozó részletes információkat a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza; sds.diversey.com. Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó. Oxidálódó felületekkel reakcióba lép.

Termék kompatibilitás

Fontos: Ne keverje más termékekkel. Ne használja meleg vízzel. Ne használja víz- vagy savérzékeny felületeken. A termékismertetőben foglaltak betartása mellett a Oxivir Excel Wipe minden általánosan használt eszköz és felület fertőtlenítésére alkalmas.

Az ajánlott felhasználási feltételek mellett a Diversey Oxivir Excel Wipe alkalmas a legtöbb általánosan előforduló anyagra, például biztonságosan használható, és kompatibilis a következőkkel: rozsdamentes acél, króm, vinil, nejlon szövet, laminált felület, üveg, gumi, kemény és rugalmas műanyagok (polipropilén, poliuretán, polietilén, PVC akril, üvegszál és polikarbonát).

Környezeti információ

A termékben található felületaktív összetevők a 648/2004. EK rendeletben foglaltaknak megfelelően biológiailag lebomlók.

Elérhető kiserelések

Diversey Oxivir Excel Wipe elérhető: 12x100 db-os lágycsomagolásban.

Használja körültekintően a biocid szereket. Használat előtt mindig olvassa el a termék címkéjét és a termékismertetőt.

Mikrobiológiai adatok

A termék mikrobiológiai hatékonyságát az alábbiakban olvasható mikrobiológiai tesztek tanúsítják.

	EN tesztek	Piszkos körülmények
		Behatási idő
Baktericid	EN 1276*	1 perc
	EN 13727	30 mp
	EN 16615	
Yeasticid	EN1650*	5 perc
	EN13624	5 perc
	EN 16615	1 perc
Virucid	EN 14476	30 mp
	(Adenovirus, Poliovirus, Murine Norovirus)	

* Piszkos körülmények között, nem egészségügyi területen végzett tesztek

AHP® and Design and Oxivir® are trademarks of Diversey, Inc.

www.diversey.com

© 2020 Diversey, Inc. All Rights Reserved. MASTER 12/20 (K00249)